



Twister Switch

	Câble	Noir	Rouge	Jaune	Bleu	Vert
Satellite Twister	court	P005-40	P005-41	P005-42	P005-43	P005-44
Twister Bended Tube	long	P005-50	P005-51	P005-52	P005-53	P005-54
	court	P005-60	P005-61	P005-62	P005-63	P005-64
Twister Basic	long	P005-70	P005-71	P005-72	P005-73	P005-74
	court	P005-15	P005-16	P005-17	P005-18	P005-19
Twister Button	long	P005-75	P005-76	P005-77	P005-78	P005-79
	court	P005-85	P005-86	P005-87	P005-88	P005-89
Twister GooseNeck	long	P018-20	P018-21	P018-22	P018-23	P018-24

Contact & Produit

mo-Vis BVBA

Biebuyckstraat 15 D
9850 Nevele - Belgique



Site Web: www.mo-vis.com

E-mail: contact@mo-vis.com

Téléphone : +32 9 335 28 60

Manuel d'installation et d'utilisation

Produit et distribué par mo-Vis bvba, Belgique

Édition 1.3, Septembre 2017

Numéro du manuel: D-P005-50-80-03

À propos de Twister

Le Twister est un contacteur simple, fiable et solide qui ne nécessite qu'un effleurement léger de sa surface de 17 mm pour être activé et est disponible en cinq couleurs. Twister utilise un jack mono standard de 3.5 mm. Branchez le Twister dans la prise jack femelle de 3,5 mm d'un appareil à contacteur adapté, d'un joystick ou d'un ordinateur (pour les ordinateurs vous aurez besoin d'une interface de contacteur)

Fonctionnement du Twister

Le contacteur Twister est un simple contacteur mécanique 'Normal Ouvert'. En d'autres mots, il s'active lorsqu'il est enfoncé.

Pour activer le Twister, poussez tout simplement sur le haut de la surface d'activation. Vous sentirez et entendrez un « clic » net et audible.

Nettoyage et entretien

Pour garantir le bon fonctionnement du Twister

- Débranchez le Twister et essuyez-le avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent ou d'alcool.
- Ne plongez jamais le Twister dans de l'eau ou une solution de nettoyage.
- Ne tirez pas sur le câble et ne l'enroulez pas autour du Twister.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter le boîtier du Twister

Garantie et informations relatives au service clients

Votre contacteur Twister comprend une garantie mo-Vis de deux ans. Elle prend effet à la date d'achat et vous protège contre les défauts matériels et de fabrication.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations sur les autres produits mo-Vis, contactez votre distributeur ou mo-Vis.

Installation



ATTENTION

*Veillez à ne pas endommager les câbles lors de l'installation du Twister.
Vérifiez régulièrement les câbles lors de l'utilisation.*

Twister button

Le Twister basic est monté dans un support conique en plastique d'un diamètre de 30 mm.


Le Twister button est livré avec un set d'auto-adhésive résistant, facile à monter.



Twister on bended tube

Le Twister on bended tube est monté sur un tube incurvé à montage rapide mo-Vis de 10 cm et 6 mm de diamètre.

Le Twister on bended tube peut être monté sur d'autres tiges ou sur le fauteuil roulant à l'aide des noix de montage rapide.

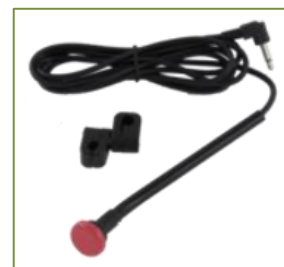

Satellite Twister

Le Satellite Twister est équipé d'un insert à monter sur l'All-round Joystick.



Twister Basic

Le Twister Basic peut être monté sur un support en métal/plastique à l'aide de deux vis ou intégré dans une tablette.



Twister GooseNeck

Le Twister Basic est intégré dans un support flexible en métal de 400mm de longueur. La longueur du câble est 1500 mm.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du contacteur Twister :

- Type de contacteur : mécanique 'normal ouvert'
- Type de branchement : câblé
- Type d'activation : par pression
- Diamètre de la surface d'activation : 1.7 cm
- Force d'activation : 30 g
- Déplacement avant activation : 0.5 mm
- Retour : clic audible, tactile
- Taille de la prise : jack mono de 3.5 mm
- Longueur du câble : câble court de 30 cm ou câble long de 150 cm

Caractéristiques de montage

Montage Twister Button

- set de 3M Dual Velcro adhésif 25*2mm
- 1 pièce adhésif ronde en caoutchouc antidérapant 28*2mm

Montage Twister on bended tube:

- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 10 cm
- 1 noix de montage rapide 6 mm

Montage Twister Basic:

- peut être monté sur un support en métal/plastique à l'aide de deux vis
- Diamètre de l'ouverture : 2.5 mm
- Distance : 8 mm
- Deux types de vis fournis
 - Diamètre 2.2 mm
Longueur 6.5 mm pour une épaisseur de feuille de 0.5 mm à 2 mm
 - Diamètre 2.2 mm
Longueur 9.5 mm pour une épaisseur de feuille de 3 mm à 4.5 mm

Montage Satellite Twister:

- Diamètre : 6 mm
- Longueur : 10 cm
- 1 pièce de montage type satellite pour fixer directement dans un joystick All-round.

Montage Twister GooseNeck:

- Peut être facilement monté avec la pince mo-Vis de 8mm, éventuellement combiné avec les tiges et les clips du système de montage mo-Vis Q2M ou avec un autre système de montage.
- La base du flexible est également prévu pour le montage dans la pince universelle Q2M (M007-01). À l'aide de cette pince, il est facile de monter le flexible sur le châssis du fauteuil roulant.